

保証書

本書は、保証規定内容により無償修理を行う事をお約束するものです。

【保証規定】


1. 本保証書は、本製品を日本国内でご使用される場合のみ有効です。
2. お客様名・販売店印・製造番号並びに、ご購入年月日の記載が無い場合は、無効とさせていただきます。
3. 以下の場合におきましては、保証期間中でも「有償修理」とさせていただきます。
 - (a) 誤ったご使用、及び不当な修理や改造によって引き起こされた故障
 - (b) 購入後の輸送・移動・落下などによる故障及び破損
 - (c) 消耗部品の交換を要する場合
 - (d) 保証書を紛失された、もしくは必要事項が未記入であった場合
 - (e) 保証書の内容を無断で修正した場合
 - (f) 火災・地震・水害・異常電圧などによる故障
 - (g) 一般家庭用以外（業務用など）でご使用された場合
4. 修理に際しては、本保証書を販売店にご提示ください。
紛失などによりご提示が無き場合は、有償修理となります。
5. 本保証書は、再発行致しませんので、大切に保管してください。

商品名	CATCH-i Es (キャッチ アイ イーエス)
製造番号	
ご購入年月日	年 月 日
保証期間対象部品	ご購入日から1年間 本体、ACアダプター
お客様名	
ご住所	〒□□□-□□□□ TEL ()
販売店	

発売元：株式会社Re-born

〒174-0065 東京都板橋区若木1-17-11

TEL：03-6789-1106

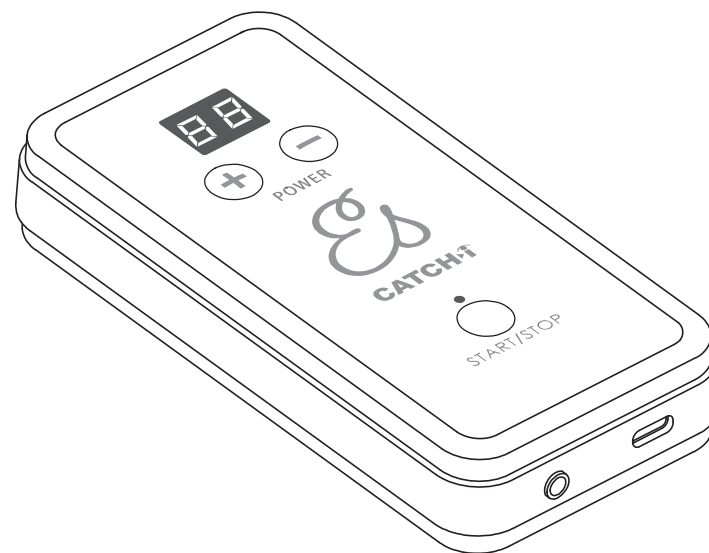

● ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

はじめに

このたびは、CATCH-i Es(キャッチアイ イーエス)をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用頂くために、お使いになる前は必ずこの取扱説明書を通りお読みください。また、お読みになった後も、巻末に保証書が付いておりますので、紛失したり汚れたりしないよう、大切に保管してください。

目次

1	安全上の注意	2~3
2	本機の説明	4
	● 標準付属品	4
	● 各部名称	4
3	充電方法について	5
4	充電池について	6
5	本機の操作方法	7~9
	● ご使用前の準備	7
	● スタート	8
	● レベル設定	8
	● 一時停止 / 中止	9
6	トリートメント方法	9
6	ミールウェーブ粘着パッドについて	10
	● ミールウェーブ粘着パッド貼り付け注意事項	10
	● ミールウェーブ粘着パッドの保管方法	10
	保証書	

1 安全上の注意


- ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みになり、指示に従って正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、ご利用者や、周りの人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

注意事項は、次のように区分されています。いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください！

- ⚠ **危険** 人が死亡・または重症を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容。
- ⚠ **警告** 人が死亡・または重症を負う可能性が想定される内容。
- ⚠ **注意** 人が障害を負う危険性、及び物的損害の発生などが想定される内容。

絵表示の例

左図記号は、禁止の行為を告げるものです。

⚠ 危険	禁止	● 下記のような医療用電子機器と併用はしないでください。また、貴金属類・時計などは、必ず外してください。 ①.ペースメーカー等の、体内植込型医用電子機器 ②.人工心肺等の、生命維持用医用電子機器 ③.心電計等の、装着型医用電子機器	
	禁止	● 次のような方は、ご使用をお避けください。 ①.心臓疾患のある方 ②.妊娠中、もしくは妊娠している可能性がある方 ③.アルコールを摂取している方	
⚠ 警告	禁止	● 使用時間や頻度は、取扱説明書の指示を守ってください。 ※ 過度のご使用は、身体に危害を与える原因となることがあります。	
	禁止	● 次のような方は、必ず医師とご相談の上でご使用ください。 ①.通院中の方 ②.原爆症の方 ③.悪性腫瘍の方 ④.急性疾患の方 ⑤.血圧異常の方 ⑥.10歳以下の方 ⑦.感染性疾患の方 ⑧.結核性疾患の方 ⑨.血友病患者の方 ⑩.法定伝染病の方 ⑪.顔面黒皮症の方 ⑫.アレルギー疾患の方 ⑬.薬を服用している方 ⑭.激しく疲労している方 ⑮.38℃以上の有熱性疾患の方 ⑯.皮膚に異常のある方 ⑰.ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方 ⑱.顔面黒皮症の方 ⑲.目の疾患を抱えている人 ⑳.目の治療中、目の手術を受けた人 ※レーシックは除く ㉑.毛細血管拡張を起こしている人 ㉒.白内障、緑内障、網膜剥離の方	
	禁止	● ご使用中に異常を感じた場合は、直ちにご使用をお止めください。	
⚠ 警告	禁止	● 粘着パッドの貼り付け位置は、心臓を挟んだ形ではお止めください。心拍が乱れる恐れがあります。	
	禁止	● 次のような部位へのご使用は、お避けください。 ①.粘膜の部位 ②.肛門や陰部 ③.月経時の腹部 ④.整形手術をした部位 ⑤.眼球の上 ⑥.ヒザ・ヒジなどの関節部 ⑦.傷口や、脱毛後間もない部位 ⑧.心臓の近く ⑨.甲状腺付近・頭部・口内 ⑩.痛覚・知覚障害を起こしている部位 ⑪.にきびや吹出物で炎症を起こしている部位 ⑫.化粧品などで皮膚炎症を起こしている部位 ⑬.アトピー・湿疹などの症状がある部位 ⑭.痒みや火照り、物理的刺激などによる、病的なシミのある部位 ⑮.金属・プラスチック・シリコンなどを、体内に埋め込んである部位	
	禁止	● 本体、および付属品を勝手に修理・分解・改造しないでください。保証期間内であっても保守・修理を受けられない場合があります。 ▼ 作動不良を起こし、火災・火傷の原因となります。	
	禁止	● 本来の目的や、用途以外には絶対にご使用にならないでください。 ▼ 事故や故障の原因となります。	

警告	禁止	●パッドやコードが壊れたり、本体に異常が発生した場合は直ちにご使用を中止し、必ず修理をご依頼ください。 ▼火災・火傷・事故の原因となります。
	禁止	●他の治療器との同時使用や、塗布剤(スプレー式など含む)との併用はしないでください。 ▼気分が悪くなったり、体調不良を起こす事があります。
	禁止	●他の電気製品との併用や、強い電波や磁気の発生する場所でのご使用や保管は、避けてください。 ▼ノイズによる誤作動や、故障の原因となる事があります。
	禁止	●トリートメント動作中に粘着パッドを脱着しないでください。脱着する際は、必ず一度トリートメントを休止してください。 ▼強いショックを受ける事があります。
	禁止	●揮発性の高いもの(ベンジン・シンナー・除光液)などの近くでは、絶対にご使用にならないでください。 ▼爆発や、火災を引き起こす恐れがあります。
	禁止	●浴室などの湿度の高いところや、入浴しながらのご使用はしないでください。また、ご使用中に本体を水に浸さないでください。 ▼強いショックを受ける事があります。
	禁止	●粘着パッドが金属に触れないようにしてください。 ▼強いショックを受ける事があります。
	禁止	●自動車などを運転しながらのご使用はしないでください。 ▼強い刺激や、事故・故障の原因となります。
禁止	●就寝中のご使用はお止めください。 ▼断線事故や、トラブルに繋がる恐れがあります。	








警告	禁止	●ガス漏れに気付いた時には、直ちにご使用を中止し、排気をしてから電源を切り、速やかにACアダプタージャックを抜いてください。 ▼ガスに引火し、爆発や火災の原因になる事があります。
	禁止	●雷が鳴り出したら、直ちにご使用を中止してください。 ▼落雷によって、過電流が流れ、異常出力が発生する場合があります。
	禁止	●高温になる場所(直射日光の当たる所や、ストーブ等の発熱器具の近くなど)や、湿気やホコリの多い場所、湯気の当たる場所(調理台・風呂場・加湿器のそばなど)でご使用、また放置しないでください。 ▼火災・感電の原因となる事があります。
	禁止	●不安定な場所に置いたり、落としたり、モノを上に乗せたりしないでください。また、操作部を必要以上に強く押ししたり、叩いたりしないでください。 ▼故障や、怪我の原因となる事があります。
禁止	●子供の手の届く場所に保管しないでください。 ▼怪我の原因となる恐れがあります。	

注意	禁止	●ACアダプタージャックやUSB Cコードを抜く時は、濡れた手で持ったり、コードを強引に引っ張らないでください。 ▼感電や、ショートして発火する事があります。
	禁止	●ACアダプターやUSB Cコードが傷んでいた、コンセントの差込みが緩い時は、ご使用にならないでください。また、タコ足配線はしないでください。 ▼感電や、ショートして発火する事があります。
	禁止	●パッドコードやUSB Cコードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に捻じ曲げたり、引っ張ったり、束ねたりしないでください。 ▼感電や、火災の危険性があります。
	禁止	●付属のACアダプター及び付属品以外は、ご使用にならないでください。 ▼火災・感電・故障の原因となります。
	禁止	●本体や、ACアダプターを濡らさないでください。 ▼万が一濡れてしまった時は、直ちにご使用を中止し、水分をよく拭き取ってください。
	禁止	●ご使用時以外は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。 ▼怪我や火傷・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

2 本機の説明


● 標準付属品

1. 本体 x1 2. ACアダプター x1 3. USB C コード x1 4. パッドコード x1

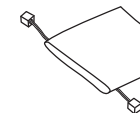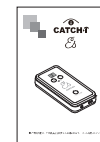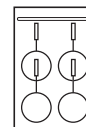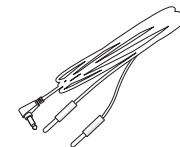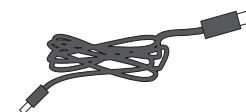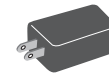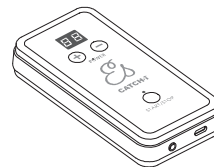

4. ミールウェーブ粘着パッド x1 5. 取扱説明書(保証書) x1 6. ポーチ x1 7. アイバンド x1


● 各部名称

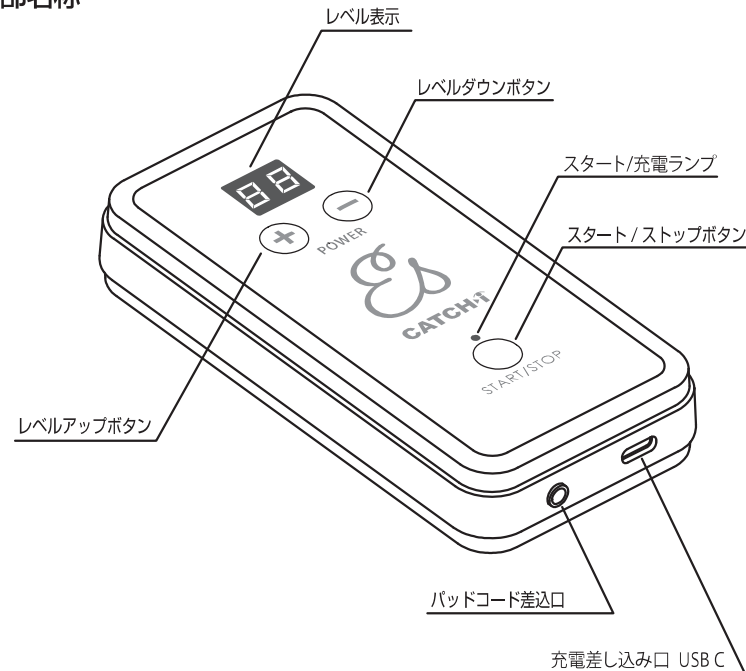

3 充電方法について

● この製品は充電タイプの製品です。ご購入後はじめてご使用になる場合は充電を行ってからご使用ください。

- ① ACアダプターをコンセントに差し、USB Cコードを接続し本体、充電差し込み口に差し込みます。
- ② ACアダプターはタコ足配線せずに、直接壁のコンセントに差しご使用ください。タコ足配線は火災の危険があります。
- ③ 充電はご使用毎にせずに、電池が消耗してから行ってください。
- ④ 充電時間は約3時間で完了致します。フル充電で約2時間30分の使用が可能です。
- ⑤ 旅行などで数日間使用しない場合には、本体からUSB Cコードを抜くかACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ⑥ 本体にUSB Cプラグを差し込むと充電を開始いたしスタート/充電ランプから点滅をはじめ充電を開始します。ランプが点灯すれば充電完了です。

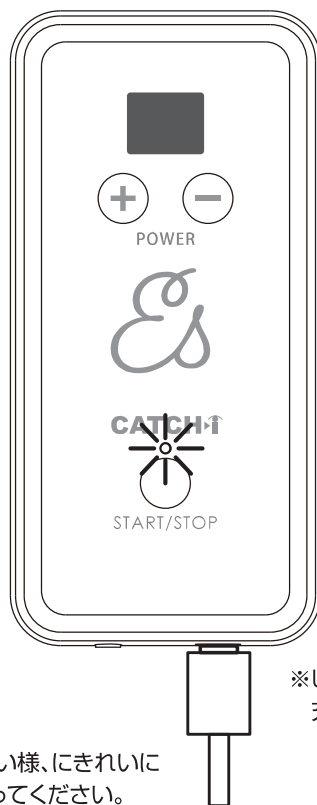

点滅：充電中
点灯：充電完了

※USB Cプラグを差し込むと
充電を開始します。

※充電する際は水濡れ等ない様にきれいに
拭き取ってから充電を行ってください。

4 充電電池について

- ① 保存に最も適した温度は15℃以下です。但し冷蔵庫に入れるなどの行為はおやめください。
- ② 0℃以下では電池容量が低下します。必ず室内においてください。
- ③ 閉め切った車内など高温になる所に放置すると、急激に充電電池が劣化します。カバンに入れて車内に置くなどの行為はおやめください。
- ④ 多湿の場所での充電は故障の原因になりますのでお避けください。
- ⑤ 直射日光の当たる場所で、充電や保管はしないでください。
- ⑥ 低温から高温のような急激な温度変化はさせないでください。
充電電池の使用範囲は0~45℃(最適23℃)です。また、温度変化により充電電池の早期劣化が懸念されます。(使用時間の減少等)
- ⑦ エアコンの風や暖房器具の熱が直接届く場所に置かないでください。

● 充電電池の特性について

本製品は、充電用のリチウムイオン電池を使用しております。充電電池の性質上、未使用の場合でも自己放電され充電量が低下してしまいます。充電が満たされた状態でも3ヶ月以上放置されたり、電池の充電量を使い切った状態で放置された場合は、充電ができなくなる場合がございます。充電電池を効率よくご使用いただくために、月に1度は充電を行うようにしてください。3時間充電してもご使用できる時間が極端に短くなったときは充電電池の交換時期と考えられます。

● 製品の廃棄について

本体を廃棄する際は、分解せずご購入店ご連絡ください。
(送料はお客様負担となりますのでご了承ください。) 充電が完全に放電した状態でお送りください。回収した製品はリサイクルのため返却できません。本体をゴミとして廃棄する場合は、お住いの市町村の指示に従ってください。

● リチウムイオン電池の交換について

リチウムイオン電池(有料)の交換は販売店までご連絡ください。




リチウムイオン電池のリサイクルにご協力をお願いします。

Li-ion

5 本機のお操作方法

● ご使用前の準備

- ① スタート/ストップボタンを長押し(2秒)すると(ピー音)電源が入りスタンバイ状態になります。その時スタート/ストップランプが点滅していると充電残量が少ない状態ですのでトリートメント前に充電を行ってください。
- ② パッドコードプラグをパッド差し込み口に差し込みミールウェーブ粘着パッドをパッドコードの両先端に取り付けます。
- ③ お肌を清潔な状態にしてからミールウェーブ粘着パッドを貼り付けてください。

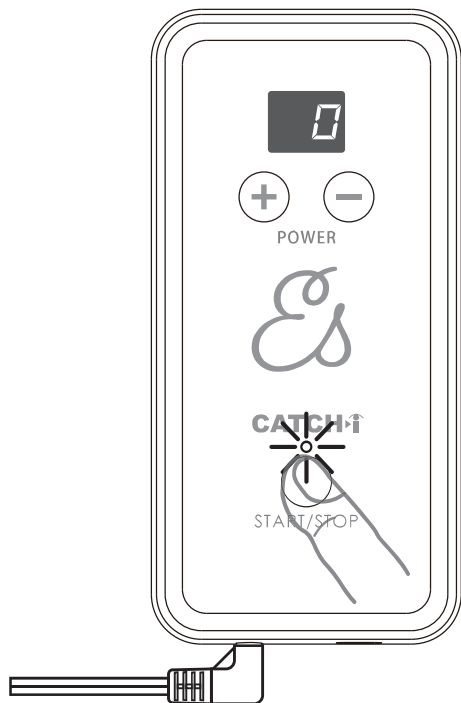

点滅：充電残量少


ご使用の注意事項



- * ネックレスやピアス、指輪、腕時計などの貴金属類は外してから行ってください。
- * 体の状態に合わせてレベルを調整してください。
- * 必ず、専用の粘着パッドをご使用してください。
- * 粘着パッドは必ず密着させてください。隙間があると刺激を強く感じます。

● スタート

スタート/ストップボタンを長押し(2秒)すると(ピー音)電源が入りスタンバイ状態になります。もう一度押し(ビッ音)スタートしレベル表示の点(点滅)し出力を開始します。10分のオートタイマーでトリートメントを終了し(ピー・ピー・ピー音)電源が切れます。

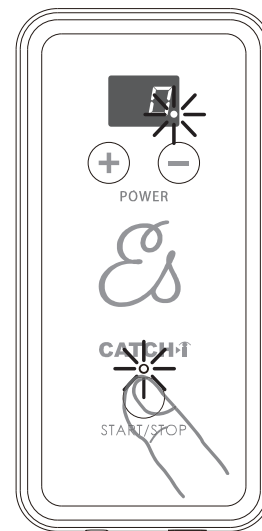


点滅：スタート

点灯：電源ON

※電源を入れた後、無操作が3分間つづくと電源が切れて(ピー・ピー・ピー音)終了します。


● レベル設定

レベルアップ/ダウンボタンを押して(ビッ音)1~12レベルの強さ設定が可能です。お好みのレベルに合せトリートメントを行ってください。

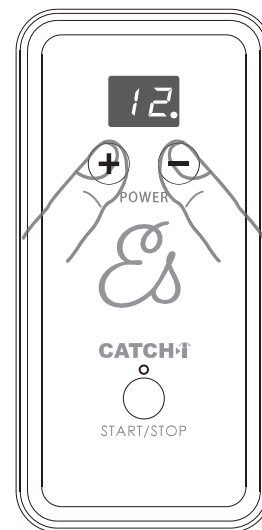

● 一時停止 / 中止

トリートメント中、スタート/ストップボタンを押すと(ピー音)一時停止します。レベル表示はゼロになります。再スタートする場合にはもう一度、スタート/ストップボタンを押すと(ピー音)出力を開始します。レベル設定は再度設定してください。

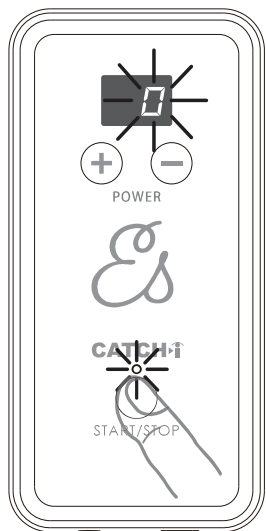


点滅：一時停止

※一時停止が3分間つくと電源が切れて(ピー・ピー・ピー音)終了します。

点灯

トリートメント中、中止したい場合はスタート/ストップボタンを長押し(2秒)押すと(ピー音)終了し電源が切れます。

6 トリートメント方法

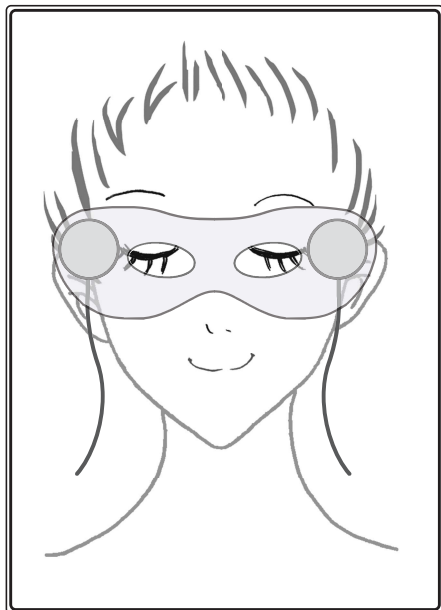

ミールウェーブ粘着パッドの端子とパッドコードをしっかり差し込み、トリートメント部位にミールウェーブ粘着パッドを貼り付けてください。電気による筋肉の収縮を感じられる心地良いレベルでトリートメントを行ってください。

ミールウェーブ粘着パッドがお肌に密着しない場合には付属のアイバンドで固定して下さい

ご使用の注意事項



* ネックレスやピアス、指輪、腕時計などの貴金属類は外してから行ってください。


* 体の状態に合わせてレベルを調整してください。

* 必ず、専用の粘着パッドをご使用してください。

* 粘着パッドは必ず密着させてください。隙間があると刺激を強く感じます。


7 ミールウェーブ粘着パッドについて

● ミールウェーブ粘着パッドの貼り付け注意事項

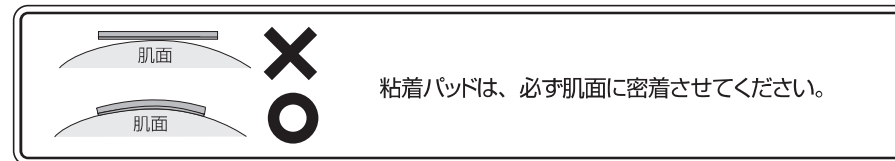

粘着パッドは、必ず肌面に密着させてください。

● ミールウェーブ粘着パッドの保管方法

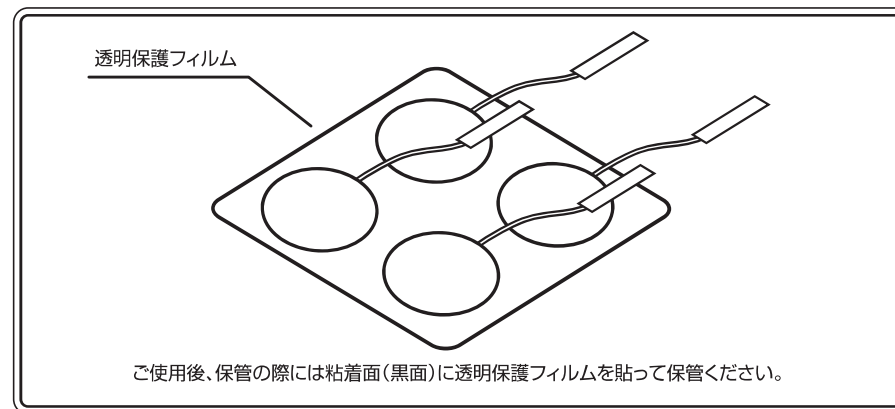

ご使用後、保管の際には粘着面(黒面)に透明保護フィルムを貼って保管ください。

- ご使用後、必ず保護フィルム(透明)を、粘着面に貼って保存してください。保護フィルムを貼らずに保存した場合、粘着面がベタベタしていますので、ゴミ、ホコリ等が付着しやすく、粘着力が弱くなり製品寿命が短くなる恐れがあります。
- 指先の爪、ブラシなどでゴシゴシ洗い粘着面をきず付けしないでください。
- お湯や洗剤、薬品(シンナー、ベンジン等)はご使用しないでください。



粘着パッドの貼り付け位置は、心臓を挟んだ形ではお止めください。心拍が乱れる恐れがあります。

粘着面が傷ついたり、はがれたりした状態でご使用すると火傷をする可能性があります。必ず新品と取り換えてご使用してください。



出力レベルは、初めは弱めに設定し、慣れるにつれ少しずつ上げていってください。いきなり高いレベルでトリートメントする事はお止めください。

お肌の状態にあわせてトリートメントを行ってください。万一お肌に異常を感じた場合は、直ちにご使用を停止してください。